



Инструкция / Manual **breo iNeck**

Массажер для шеи iNeck является запатентованным изделием компании BREO, который расслабляет шейные позвонки при помощи разминания, надавливания и массирования активных точек на шее. Используя методики массажа шиатцу, iNeck помогает расслабить напряженные мышцы, снять усталость и полностью расслабить шею.




Введение


Служит для облегчения мышечных болей в шее. Массажер для шеи iNeck является запатентованным изделием компании BREO, который расслабляет шейные позвонки при помощи разминания, надавливания и массажа активных точек на шее. Используя методики массажа шиаццу, iNeck помогает расслабить напряженные мышцы, снять усталость и полностью расслабить шею.

Состав комплекта


Комплект включает: массажер 1шт, зарядное устройство 1шт, ремешок для перехватывания волос 1шт, руководство пользователя 1шт.

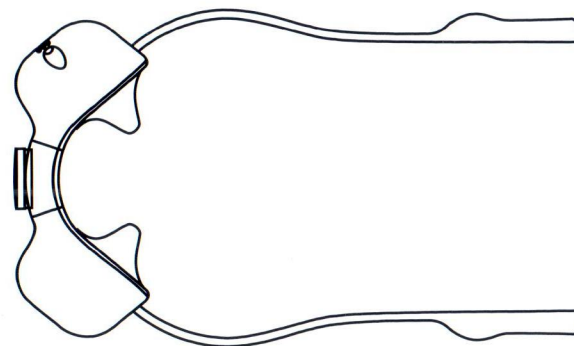

Главный прибор

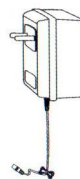

Зарядное устройство

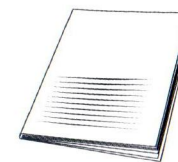


Инструкция



Ремешок для волос

Размещение функциональных элементов

Массажер.

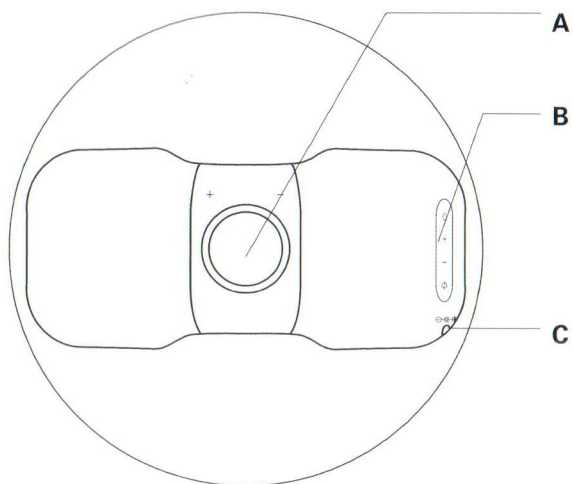

A Ручка регулировки размера

B Кнопки управления

(сверху вниз: кнопка питания, кнопка повышения уровня интенсивности, кнопка снижения уровня интенсивности, кнопка выбора режима)

C Порт постоянного питания

Подготовка

Перед использованием проверьте состояние массажера и принадлежностей.

1. Отсутствие повреждений на зарядном устройстве.
2. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием.

Зарядка

1. Откройте крышку порта постоянного питания на главном блоке.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в порт постоянного питания.
3. Во время зарядки светодиодный индикатор мигает красным и зеленым поочередно. Светодиодный индикатор начинает гореть зеленым светом, когда аккумулятор полностью заряжен.
4. Главный блок питается от высокоэффективного литиевого аккумулятора.

Использование

1. Возьмитесь руками за рукоятки и поместите массажные головки массажера на шейные позвонки (с задней стороны шеи). Поверните ручку регулировки размера, чтобы добиться наиболее комфортного прилегания.
2. Потяните рукоятки обеими руками и добейтесь режима и интенсивности массажа, которые Вы предпочитаете.

Действие

Включение питания:

Нажмите кнопку питания - светодиод загорится красным, и массажер немедленно начнет работу (Настройка по умолчанию: средняя интенсивность + режим шиаццу, длительность 15 минут)

Вручную нажимайте кнопки функций для переключения между уровнями интенсивности и режимами массажа.

Выключение питания:

Нажмите кнопку питания - светодиод погаснет, и массажер выключится. (Когда время массажа истекает, массажер выключается автоматически)

Ручной режим

Выбор режима:

По умолчанию выбран режим шиаццу 4
Нажатием кнопки режим массажа будет переключаться в следующей последовательности: режим шиаццу 1 > режим шиаццу 2 > режим шиаццу 3 > режим шиаццу 4 (четыре режима отличаются по направлению движений)

Выбор уровня интенсивности:

По умолчанию: мягкая интенсивность
Нажмите кнопку + для увеличения интенсивности
Нажмите кнопку — для уменьшения интенсивности
погружать в воду.

(1) Примечание: нажатие кнопок всегда сопровождается звуковым сигналом.

Меры предосторожности

1. Тщательно прочитайте руководство и используйте устройство в соответствии с ним.
2. Детям до 18 лет запрещается использовать массажер.
3. Не допускайте воздействия на массажер влаги, тепла и едких газов.
4. Не использовать на ходу или во время вождения.
5. Если у вас длинные волосы, мы рекомендуем вам подвязать их перед использованием массажера. Это не даст устройству защемить волосы механизмом.
6. Используйте только зарядное устройство с постоянным напряжением 5В из комплекта поставки, используйте с осторожностью и в соответствии со спецификацией.
7. Данный массажер не должен использоваться:
(а) Людьми, которые страдают от опухоли, воспаления или закупорки кровеносного сосуда в шее, или которые перенесли операцию на шее
(б) Людьми, которые страдают гипертонией и психическими заболеваниями
8. Массажер является изделием для ухода за собой и не заменяет советов и процедур, которые могут быть оказаны профессиональными врачами. В сомнительных случаях или в случае необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
9. Для очистки протрите поверхность стерильной ватой, смоченной в спирте. Не мыть водой и не погружать в воду.
10. Данное устройство соответствует части 15 правил Американской государственной комиссии по коммуникациям (FCC). Эксплуатация определяется следующими двумя условиями:
(1) это устройство не должно вызывать вредных помех, и
(2) это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное срабатывание.

Меры предосторожности

11. Необходимо отметить, что изменения или модификации, не разрешенные стороной, ответственной за обеспечение соответствия, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.
12. Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям класса В цифровых устройств в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать неблагоприятные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантий, что помехи не возникнут в применении по назначению. Если данное оборудование вырабатывает неблагоприятные помехи для радио- и телеприема, которые пропадают при выключении оборудования, пользователь может попробовать снизить влияние помех одним из следующих способов:
 - Изменить направление или переместить приемную антенну.
 - Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
 - Подключить оборудование к розетке, питающейся от цепи, не связанной с розеткой, питающей приемник.
 - Проконсультироваться с дилером или обратиться за помощью к опытному технику в области радио/ТВ.

Меры предосторожности

Когда возникают неполадки в работе, см. таблицу ниже. Не разбирать устройство и не пытаться ремонтировать его самостоятельно.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Не включается	Низкий заряд литиевого аккумулятора	Зарядить аккумулятор
Слабая вибрация	Низкий заряд литиевого аккумулятора	Зарядить аккумулятор

Питание: =5 В
Идеальная среда:
Температура : от 5°C до 40°C
Мощность: 10 Вт
Относительная влажность: ≤80%
Масса: Д:223мм x Ш:102мм x В:92мм
НЕТТО: 850г
Атмосферное давление: 860гПа ~ 1060гПа