

**ERGONOVA**


# FeelFoot 2

Массажер для ног

**ERGONOVA**



Designed by Ergonova Germany  
[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

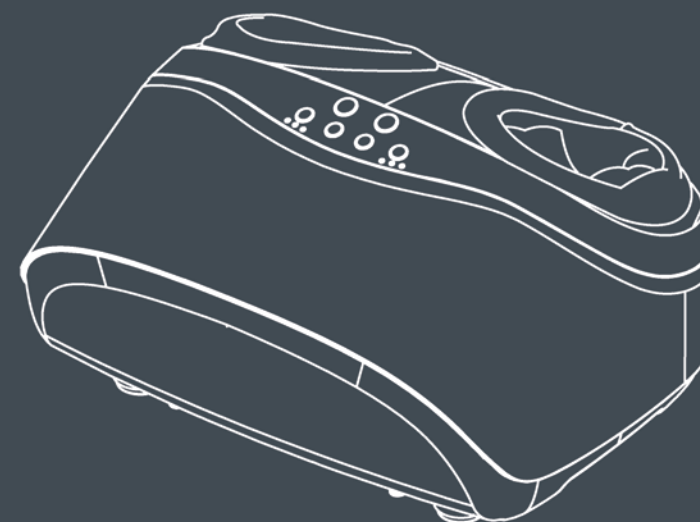

Руководство пользователя

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте и не храните массажер во влажной среде : ванная комната, сауна, чтобы избежать поражения электрическим током , возгорания или механических повреждений массажера.



- Не используйте массажер на открытом воздухе
- Не используйте массажер в пыльных, грязных и бескислородных условиях



- Не ставьте массажер возле обогревателя , печи или прямого солнечного света , чтобы избежать перегрева внутренних компонентов , что может привести к пожару



- Проверьте, чтобы массажер находился на ровной поверхности (пол)
- Ножки массажера должны стоять ровно на полу
- Не используйте массажер во время курения
- Не используйте массажер после операции на злокачественные опухоли
- Не используйте массажер при сердечных заболеваниях
- Не используйте массажер при кожных заболеваниях
- Не используйте массажер при гиперплазии костей
- Не используйте массажер во время беременности и во время менструации
- Не использовать массажер несовершеннолетним детям без присмотра взрослых
- Не используйте массажер при артрите
- Не используйте массажер при гастрите и диарее
- Не используйте массажер с проблемами кровообращения
- Не используйте массажер при высокой температуре тела (грипп, орви и т.п.)

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности не следует использовать массажер ненадлежащим образом, внимательно прочтите инструкцию.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не разбирайте массажер в случае поломки, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Не используйте массажер во влажной среде

При хранении и обслуживании, обязательно выньте вилку из розетки, не отсоединяйте вилку влажными руками

Если массажер длительное время не используется, отсоедините его от электросети

Не ставьте массажер на неустойчивую поверхность, чтобы избежать повреждения корпуса при работе. При хранении массажера, не забудьте отключить питание, чтобы избежать пожара, вызванного скачком напряжения


Чистите периодически вилку от пыли

Не скручивайте шнур электропитания во время работы массажера



Не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания, во избежания разрыва контактов провода, что может привести к возгоранию проводки электросети



## ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА

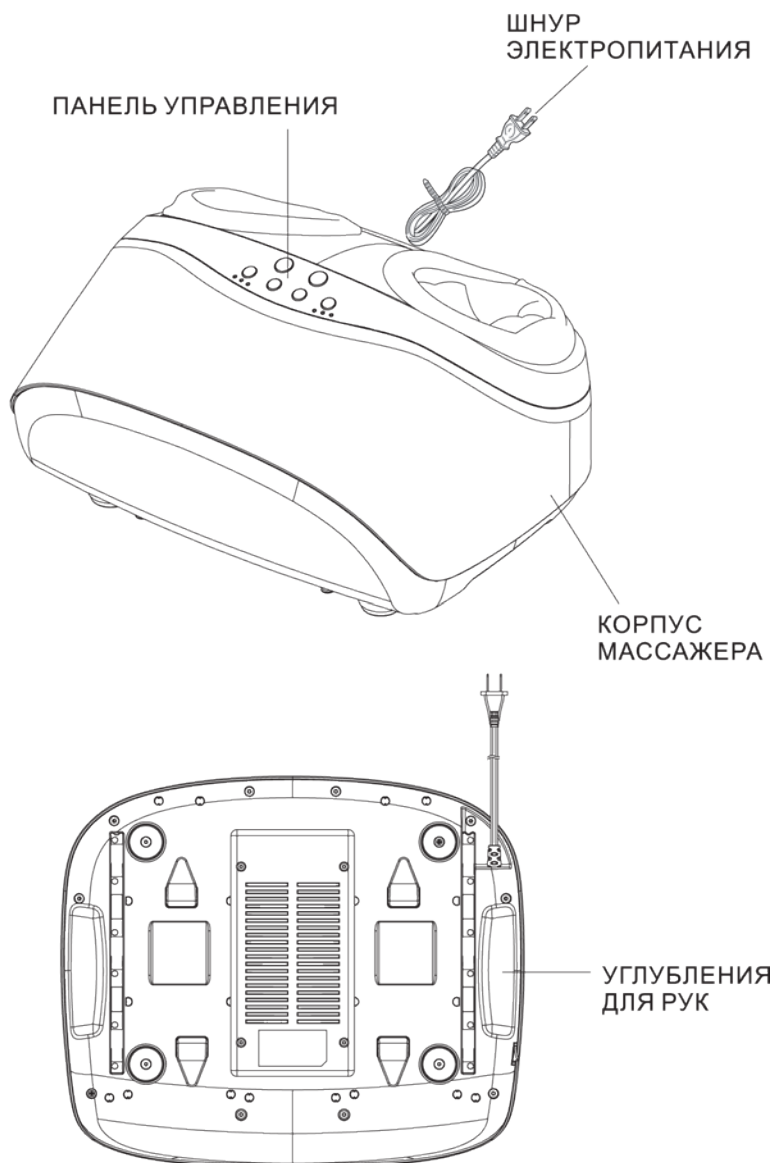

## Начало работы:

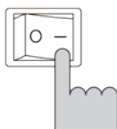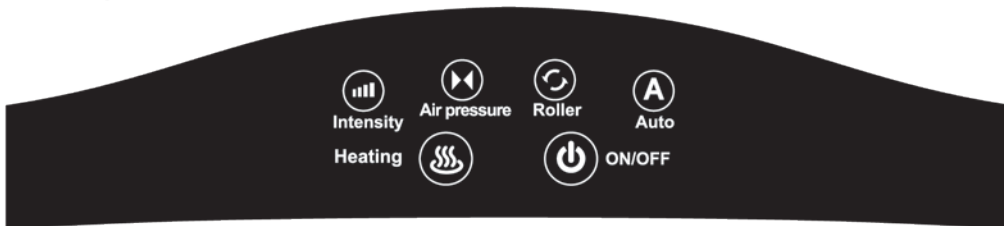

Включение массажера, нажмите на кнопку включения общего питания массажера.

Нажмите кнопку "  " ВКЛ / ВКЛ.



3-авто программы **Auto** доступны для использования, нажмите на эту кнопку для выбора программы массажа

Program1 (красный свет):

Сочетание давления воздуха, роликовый массаж, точечный массаж

® Program2 (желтый свет):









Разминающий массаж ступней ног

Авто program3 (синий свет):

Программа идеально подойдет женщинам, любящим ходить на высоких шпильках, каблуках, программа объединяет в себе роликовый и воздушный массаж ног

Во время массажа можете поменять интенсивность, нажав на кнопку интенсивности массажа:



 <p><b>Air pressure</b></p>	<p><b>Воздушно-компрессионный массаж.</b>          Чтобы отрегулировать интенсивность воздушно-компрессионного массажа используйте кнопку Intensity          По умолчанию установлена слабая интенсивность.</p>  <p><b>Intensity</b></p>
 <p><b>Roller</b></p>	<p><b>Роликовый массаж.</b>          Регулировка направления движений массажных роликов.          Чтобы отрегулировать скорость движения массажных роликов используйте кнопку Intensity          По умолчанию установлена медленная скорость.</p>  <p><b>Intensity</b></p>
 <p><b>Intensity</b></p>	<p><b>Регулировка интенсивности.</b>          По умолчанию интенсивность массажа установлена в режиме Weak 1 (слабая интенсивность).          Нажмите кнопку Intensity несколько раз, чтобы отрегулировать нужную интенсивность массажа.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Синий Желтый Красный</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Значения световых индикаторов:          Weak 1, Weak 2 - слабая интенсивность.          Middle 1, Middle 2 - средняя интенсивность          Strong 1, Strong 2 - сильная интенсивность</p>
 <p><b>Heating</b></p>	<p><b>Прогрев</b>          Нажмите кнопку Heating, чтобы включить функцию прогрева.          Чтобы отключить функцию, нажмите эту же кнопку повторно.</p>

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, выключайте массажер для ног , когда Вы долгое время не используете его

<p><b>Неисправности и их устранение</b></p> <p>Массажер для ног не работает</p> <p>ON / OFF (вкл / выкл) не загораются</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте подключение к электропитанию</li><li>2. Проверьте выключатель массажера</li></ol>
<p><b>Звуки во время работы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. при прокатке и давлении воздуха при работе массажера;</li><li>2. при выходе воздуха во время воздушного массажа;</li><li>3. трение роликов о ткань.</li></ol>
<p><b>Решение неотложных проблем</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Если Вы обнаружили нехарактерные резкие звуки или запах гари в массажере, отключите электропитание, обратитесь в сервисный центр.</li><li>2. Если массажер не работает в связи с отсутствием подачи тока из-за неполадки провода, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр</li></ol>

### Решение неотложных проблем

1. Если Вы обнаружили нехарактерные резкие звуки или запах гари в массажере, отключите электропитание, обратитесь в сервисный центр.
2. Если массажер не работает в связи с отсутствием подачи тока из-за неполадки провода, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Модель</b></p> <p><b>Номинальное напряжение</b></p> <p><b>Номинальная частота</b></p> <p><b>Номинальная мощность</b></p> <p><b>Номинальный рабочий час</b></p> <p><b>Дата производства:</b></p>	<p><b>Массажер для ног</b></p> <p><b>FeelFoot2 (Series TF)</b></p> <p>□ 110-120В ~ □ 220-240V ~</p> <p><b>50 Гц</b></p> <p><b>60 Вт</b></p> <p><b>15 мин</b></p> <p><b>смотреть на массажере</b></p>
--	--

Генеральный импортер в России :  
ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532  
109518, Москва, ул.Гайвороновская, д. 4, стр.1

Представительство в ТЦ «МЕГА Белая Дача»  
1-й Покровский пр-д, д.5, г. Котельники, Люберецкий р-н, Московская область

Тел. 8-800-700-14-29  
info@ergonova.ru  
www.ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH  
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.  
Ergonova GmbH  
Все права защищены

