




FeelBack2

массажная накидка

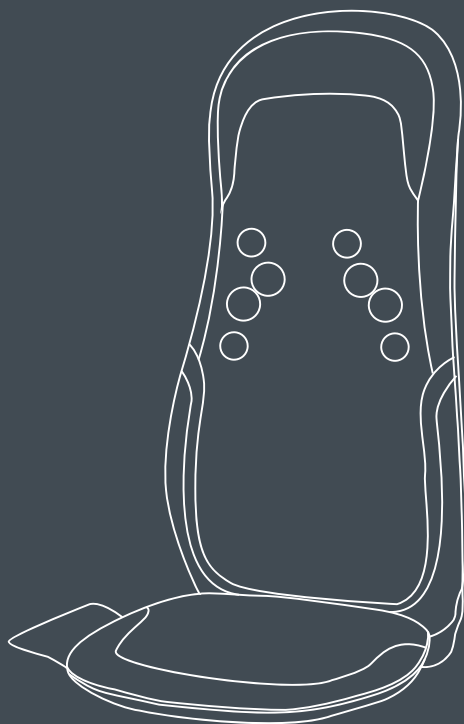


Руководство пользователя

Содержание

Техника безопасности	3
Эксплуатация	5
Чистка и уборка	5
Хранение	6
Комплектация	6
Назначение устройства	6
Описание функций	7
Инструкция по эксплуатации	8
Технические параметры	10

Благодарим вас за покупку массажной накидки.

Настоящее Руководство пользователя предназначено для предоставления Вам рекомендаций, гарантирующих безопасность работы этого изделия и не представляющего риска для пользователя. Любое использование, не соответствующее рекомендациям, описанным в настоящем Руководстве пользователя, может привести к аннулированию гарантии на изделие. Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед использованием изделия, в особенности указания по технике безопасности, и сохраните данное руководство для справки. Если,

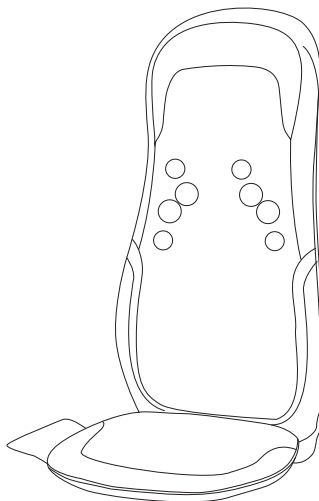

Вы передаете устройство другим лицам, передавайте вместе с ним и Руководство пользователя. Это устройство предназначено только для домашнего использования.

Гарантийный срок на изделие - один год, при условии соблюдения всех требований и ограничений. См. Гарантийную информацию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности и сохраните данное Руководство пользователя для дальнейшего использования

Объяснение символов

Это Руководство пользователя данного устройства.

Оно содержит важную информацию об использовании данного изделия.

Внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или повреждению устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ!

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе устройства.

Инструкции по технике безопасности о блоке питания



- Перед подключением данного устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение питания, указанное на табличке, соответствует источнику питания
- Подключайте сетевой разъем к розетке только при выключенном устройстве.
- Держите шнур питания и само устройство вдали от тепла, горячих поверхностей, сырости и жидкостей. Не прикасайтесь к сетевой вилке или выключателю питания мокрыми или влажными руками, или стоя в воде.
- Если устройство попало в воду, не трогайте его, немедленно отсоедините от розетки
- Отключайте данное устройство от розетки сразу после его использования.
- Не отключайте устройство из розетки, потянув за шнур. Всегда держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не несите, не тяните и не вращайте устройство с помощью шнура питания
- Не размещайте шнур питания в проходах, чтобы предотвратить отключение. Кабель не должен быть перегнут, зажат или перекручен.

Руководство пользователя

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с недостаточным опытом и/или знаниями, если только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они прошли инструктаж по использованию данного устройства.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с этим устройством, это не игрушка.
- Не используйте это устройство для того, чтобы, дополнить или заменить медицинское лечение. Хронические жалобы и симптомы могут ухудшить ваше состояние
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта, если:
 - Вы беременны
 - У Вас кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты.
 - Вы страдаете одним или несколькими из следующих состояний: нарушения кровообращения, диабет, тромбозы, варикозные вены, открытые раны, синяки, раны, язвы или воспаление вен.
- Если Вы испытываете боль или дискомфорт во время массажа, немедленно прекратите использование устройства и проконсультируйтесь с врачом.
- Никогда не оставляйте данное устройство без присмотра, когда оно подключено к источнику питания
- Используйте функцию подогрева осторожно. Не используйте, если у вас проблемы с кровообращением или на участках, не чувствительных к нагреву. Существует опасность ожога!
- Поверхность прибора горячая. Лица, чувствительные к нагреву, должны проявлять осторожность при использовании данного изделия.
- Проконсультируйтесь с врачом по любым вопросам относительно использования данного изделия в терапевтических целях.
- Если у вас есть необъяснимая боль, Вы получаете лечение, назначенное врачом и/или используете медицинское оборудование, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства
- Данное устройство нельзя использовать:
 - детям;
 - животным;
 - во время сна;
 - во время вождения автомобиля.

Перед использованием

- Перед использованием всегда проверяйте кабель, пульт управления и само устройство. Не используйте неисправное устройство.
- Не используйте устройство, если на самом изделии или на компонентах кабеля видны повреждения, если устройство работает, неправильно или если сиденье блока управления подверглось удару либо падению, или стало влажным.
- Чтобы избежать опасностей, обратитесь с неисправным прибором в сервисный центр для ремонта.
- Застежка-молния на задней части массажного устройства не должна открываться. Он устанавливается только по причинам, связанным с производством продукта.

Эксплуатация

- Данное изделие должно использоваться только по назначению, как описано в данном Руководстве пользователя. Любое другое использование приведет к аннулированию гарантии.
- Никогда не оставляйте это изделие без присмотра, когда оно подключено к источнику питания.
- Максимальное время работы составляет 15 минут. После использования дайте устройству остыть в течение как минимум 15 минут перед повторным использованием.
- Не позволяйте массажной накидке соприкасаться с острыми предметами.
- Никогда не устанавливайте данное изделие рядом с электрической плитой или другим источником тепла.
- Никогда не используйте изделие, если оно сложено или скомкано.
- Никогда не используйте это устройство вместо одеяла или подушки.
- Используйте данное устройство всегда в вертикальном положении. Не кладите его на пол.
- Убедитесь, что все движущиеся части могут свободно двигаться без ограничений и помех.
- Никогда не сидите и не стойте на этом устройстве полным весом тела. Не кладите предметы на данное устройство.



Данное устройство предназначено только для домашнего использования и не должно использоваться в коммерческих или медицинских целях. Если у Вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием массажной накидки.



Устройство должно использоваться только в закрытых помещениях (жилых помещениях).



Не используйте данное устройство во влажных помещениях (например, во время купания или душа).

Чистка и уборка

- Вы можете выполнять только очистку устройства. Если устройство неисправно, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это аннулирует его гарантию. Привезите неисправное изделие к специалистам для ремонта.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Если вода проникает в данное устройство, немедленно отсоедините его от розетки:



Не мойте!

Не подвергать сухой химчистке!

Не использовать вовремя вождения автомобиля.

Хранение

- Извлеките вилку из розетки.
- Храните устройство в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство при хранении.

Комплектация

Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что устройство находится в комплекте и без повреждений. Если Вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или сервисным центром.

Комплект включает в себя:

- Накидка массажная
- Пульт управления (контроллер)
- Руководство пользователя

Упаковка может быть повторно использована или переработана. Пожалуйста, утилизируйте неиспользуемые упаковочные материалы соответствующим образом.



ВНИМАНИЕ!

Риск удушья! Пожалуйста, держите упаковочный полиэтиленовый пакет в недоступном для детей месте.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Массажная накидка обеспечивает расслабляющий или бодрящий массаж в соответствии с Вашими предпочтениями.

Он включает в себя разминающий массаж, массаж в стиле шиацу, массаж спины и поясницы, а также, вибрационный массаж для спины и бедер.

Наслаждайтесь комфортным массажем с подогревом, чтобы облегчить напряжение и облегчить боль.

Спинка сиденья состоит из 4 групп массажных головок с регулируемой шириной для оптимального комфорта при массаже.

Описание функций



Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы

- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в этом руководстве.
- Поместите массажную накидку на устойчивый стул/кресло с достаточно высокой спинкой и закрепите накидку с помощью эластичной ленты крепежных ремней.
- Подключите массажную накидку к сетевой розетке, которая соответствует требованиям к напряжению устройства.
- Сядьте на стул/кресло, опираясь спиной на массажную накидку. Отрегулируйте ее и убедитесь, что сидите в центре стула/кресла, для обеспечения равномерного массажа.

Общая информация

- Режимы массажа спины — это разминающий массаж, массаж шиацу и роликовый массаж по всей поверхности спины.
- Вы также можете зафиксировать положение массажных роликов в конкретном положении, а также отрегулировать ширину пространства между массажными роликами.
- Нижняя часть массажной накидки (в области сидения) обеспечивает вибрационный массаж.
- Функция подогрева и вибрационный массаж совместимы со всеми другими массажными функциями.
- В устройство встроен таймер на 15 минут, Через 15 минут устройство автоматически выключится.
- В случае перегрева устройство автоматически выключится. Отсоедините изделие от источника. Дождитесь охлаждения устройства
- Если возникают какие-либо проблемы при эксплуатации, не продолжайте использование устройства. Обратитесь в сервисный центр.
- Инструкции для кнопок пульта управления (контроллера)
- Используйте кнопки пульта управления для управления устройством.

Кнопка питания

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания. Загорится светодиодный индикатор, и устройство начнет работать в автоматическом режиме по умолчанию: разминающий массаж всей поверхности спины
- Устройство автоматически отключится через 15 минут.
- Настройте тип массажа или время, используя кнопки на пульте управления.
- Для отключения нажмите кнопку питания еще раз. Массажные головки будут возвращены в исходное положение.

Кнопка функции нагрева

Нажмите кнопку функции нагрева в любом режиме массажа, включая вибрацию. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить функцию обогрева.

Кнопка режима вибрации

Вибрационный массаж функционирует в сиденье подушки. Вибрация может работать одновременно с любым другим режимом массажа

Кнопка режима Шиацу

Режим Шиацу обеспечивает возвратно-поступательный массаж в зоне спины. Этот режим может работать вместе с разминающим массажем всей поверхности спины, массажем верхней и нижней части спины, регулировкой ширины расположения массажных роликов, и функцией фиксированного положения роликов. Для запуска либо остановки нажмите кнопку Шиацу

