

## Массажер для ног СУ-807



# TAKASIMA

Представитель ООО «Корда» по России  
190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, 9

Телефон: +7 (812) 363-43-33  
E-mail: office@korda.spb.ru

[www.takasima.ru](http://www.takasima.ru)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[www.takasima.ru](http://www.takasima.ru)

**ТАКАШМА**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ТАКАШМА**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



## Уход за массажером и выявление неисправностей

1. Запрещается использовать моющие средства, содержащие легкоиспаряющиеся растворители (в том числе метилбензол, растворитель лаков и бензин).
2. Используйте нейтральные моющие средства или воду. Протирайте массажер мягкой тряпкой, смоченной в воде или нейтральном моющем средстве.
3. Съемную обивку необходимо мыть руками. Механическая мойка может повредить молнию обивки

## Устранение неисправностей

Неисправность	Решение проблемы
Массажер не включается, когда индикаторы горят.	Проверьте, правильно ли подключены шнуры питания в розетку.
Массажер перестает работать во время его использования.	Выключите массажер и включите заново.
Утечка воздуха во время использования массажера.	Это нормальная ситуация, если воздух перекачивается в большом объеме.

## Способы решения непредвиденных случаев

1. Если вы заметили отклонения в работе массажера, то необходимо прекратить его использование.
2. Если вы заметили какие-либо неполадки во внутренних деталях массажера, свяжитесь с нашей службой поддержки.

## Спецификации

<b>Модель</b>	<b>СУ-807</b>
Размеры	565(L) x 450(W) x 590(H)(mm)
Вес нетто	20 кг
Номинальное напряжение/частота	220 V - 240 V ~ /50 Hz
Потребляемая мощность	100 W
Производство	Тайвань

## Содержание:



Меры предосторожности .....	4-6
Список деталей .....	7
Описание дисплея .....	8
Эксплуатация массажера .....	9-13
Уход за массажером /выявление неисправностей .....	14











## Меры предосторожности

Перед использованием массажера внимательно прочитайте инструкцию. Эксплуатируйте массажер правильно. Повреждения и поломки могут быть вызваны несоблюдением мер предосторожности.

Для защиты оборудования от перепадов напряжения рекомендуется подключать прибор через сетевой фильтр.


 <b>Предупреждение!</b>	Этот знак означает возможность повреждений и неполадок.
 <b>Внимание!</b>	Этот знак обозначает возможность нанесения травм человеку и повреждения окружающих объектов.

## Предупреждение

 Нельзя вносить изменения в устройство массажера. Кроме того, разбирать и осуществлять ремонт массажера может только квалифицированный специалист.	 Любые нарушения в работе массажера могут быть причиной его возгорания, а также электрического шока или травмирования.
 Не используйте поврежденный шнур или вилку. Несоблюдение правил безопасности может вызвать электрический шок или причинить травму.	 Обеспечивать ремонт и техническое обслуживание могут только официальные поставщики или производитель.
 Пользуйтесь массажером по прямому назначению, не применяйте его в других целях.	 При техническом обслуживании массажера убедитесь в том, что он не включен в розетку. Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками. Несоблюдение правил безопасности может стать причиной электрического травмирования.
 Использование массажера не по назначению может стать причиной неполадок и несчастных случаев.	 Не допускайте повреждений, скручивания, перегибания шнура, не тяните его и не помещайте на устройство тяжелые предметы. Несоблюдение правил безопасности может стать причиной пожара или электрического шока.

## Эксплуатация

### Авто программы

-  AUTO
- 1. Первая фаза – Включено – лампочка горит
  - 2. Вторая фаза Включено – лампочка мигает
  - 3. Выключено – лампочка гаснет.


Нажмите кнопку автоматических программ. Есть 2 автоматические программы. Порядок выбора фаз показан ниже.



<input type="radio"/> 1 фаза	Первая фаза. Данная функция разработана для общего массажа и особенно подходит тем, кто только начинает пользоваться массажером.
<input checked="" type="radio"/> 2 фаза	Вторая фаза. Данная программа подходит для массажа ног. Возможен массаж пяток, внутренней и внешней стороны подъема стоп.

- Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
- Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.


### Выбор функции вибрации

-  Индикатор функции вибрации
- Включено – лампочка горит
  - Выключено – лампочка гаснет

Функция вибрации запускается после нажатия кнопки. Повторное нажатие кнопки прекратит функцию вибрации.

- Данная функция не может быть включена отдельно, она активизируется только при использовании других функций.

### Выбор мощности массажа

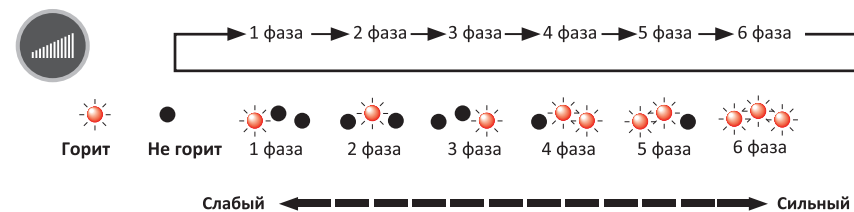

- Данная функция не может работать самостоятельно, она включается только после начала работы других функций.

## Выбор массажных программ и запуск функций.

### Индикатор массажа стоп

- FOOT**
- 1. Первая фаза – Включено – лампочка горит
  - ◐ 2. Вторая фаза Включено – лампочка мигает
  - 3. Выключено – лампочка гаснет.

Нажмите кнопку программируемой функции массажа стоп. Предусмотрено 2 программы массажа стоп. Порядок выбора фаз показан ниже.



○ 1 фаза	Первая фаза. Данная функция разработана в основном для массажа стоп. Также сюда включены функции сдвливания в качестве дополнительных программ.
◐ 2 фаза	Вторая фаза. Подходит в основном для массажа стоп. Здесь возможен массаж кончиков пальцев, пяток, внутренней и внешней стороны подъема ноги.

- Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
- Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.

### Выбор функции вибрации

- LEG**
- 1. Первая фаза – Включено – лампочка горит
  - ◐ 2. Вторая фаза Включено – лампочка мигает
  - 3. Выключено – лампочка гаснет.

Нажмите кнопку программируемой функции массажа ног. Есть 2 программы массажа ног. Порядок выбора фаз показан ниже.



○ 1 фаза	Первая фаза. Возможен массаж кончиков пальцев, пяток, внутренней и внешней стороны подъема ноги, ахиллова сухожилия и ног.
◐ 2 фаза	Вторая фаза. Функции массажа схожи в функциями массажа первой фазы, (включают функции надавливания).




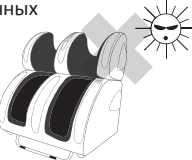
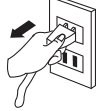
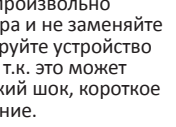




- Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
- Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.

## ⚠ Внимание!

<p>При выключении массажера из сети не тяните шнур питания. Необходимо извлечь вилку из розетки, придерживая головку шнура. Нарушения правил безопасности опасны для здоровья и могут стать причиной короткого замыкания, появления искр и электрического шока.</p>	<p>Не бросайте огнеопасные предметы в массажер, не курите во время его эксплуатации. Это может вызвать пожар.</p>
<p>Не распыляйте на массажер масло, краску или пестициды.</p>	<p>Не используйте массажер вблизи веществ, содержащих нефть. Это может вызвать пожар.</p>
<p>Если вы не планируете использовать массажер в течение длительного времени, убедитесь в том, что он отключен от сети. Запуск электроэнергии в режиме ожидания может стать причиной возгорания.</p>	<p>Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью (таких как ванная). Это может стать причиной сбоев в электричестве.</p>
<p>Перед использованием массажера убедитесь в том, что он надежно подключен к сети. Вилка должна быть плотно и крепко воткнута в розетку. Неполное соединение с источником электроэнергии может стать причиной несчастных случаев.</p>	<p>Никогда не используйте неисправный или поврежденный шнур питания. Это может вызвать электрический шок, короткое замыкание или возгорание.</p>
<p>Подключайте массажер только при электрическом напряжении 220/240 Вольт. Подключение массажера при другом электрическом напряжении может стать причиной несчастных случаев.</p>	<p>Не вставляйте вилку в розетку с несколькими входами. Нельзя соединять блок питания с удлинителем шнуром или другими бытовыми приборами. Это может вызвать перегрев или стать причиной пожара.</p>
<p>Нельзя наступать на шнур питания. Повреждение шнура питания или вилки могут стать причиной утечки электричества и возгорания.</p>	<p>Не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками.</p>



## ⚠ Заметки и комментарии

<p>При эксплуатации массажера нельзя совершать шаговые движения. Это может отрицательно повлиять на работу массажера, а также травмировать стопы.</p> 	<p>⊘ Запрещается вставать ногами на верхнюю часть массажера. Это может привести к нарушению работы массажера.</p> 
<p>Не промывайте электрические переключатели водой. Это может вызвать утечку электричества и короткое замыкание.</p> 	<p>⊘ Не подвергайте массажер воздействию солнечных лучей. Это может привести к сбоям в работе аппарата.</p> 
<p>Убедитесь том, что шнур питания выключен из розетки, если вы не собираетесь использовать массажер в течение длительного периода времени. Нельзя пользоваться массажером в неправильной позе, например, ставить ступни наискосок. Это может нанести вред и травмирование.</p> 	<p>⊘ Не изменяйте самопроизвольно устройство массажера и не заменяйте детали. Не демонтируйте устройство корпуса массажера, т.к. это может вызвать электрический шок, короткое замыкание, возгорание.</p> 
<p>При возникновении нестандартных ситуаций ( появление запаха гари) необходимо прекратить эксплуатацию массажера и отключить его от питания. Продолжительная эксплуатация массажера в неблагоприятных условиях, может привести к повреждениям шнуров, воспламенению или электрическому шоку.</p> 	<p>⊘ Старайтесь не эксплуатировать массажер в местах повышенной влажности и возможного попадания воды на устройство. Это может стать причиной появления ржавчины и поломки аппарата.</p> 
<p>Не разрешайте детям находиться вблизи массажера во время его эксплуатации.</p> 	<p>⊘ Во избежание электрического шока или несчастных случаев не разрешайте детям прикасаться к розеткам.</p> 


## Эксплуатация

### Использование передней педали.

Когда передняя педаль выдвинута вперед: В этом положении стопы размещаются на том месте, где происходит сдавливание. Такая позиция подходит для программируемой функции массажа ног.



Когда бедра расположены плашмя: Такая позиция подходит для программируемой функции массажа ног.

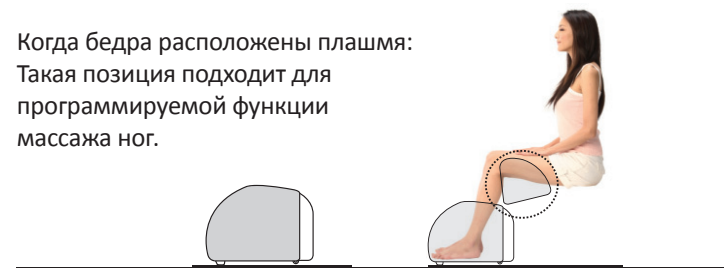

Массаж икр: Массаж икр можно осуществлять, запуская автоматическую программу массажа ног.



Виды массажа, описанные выше, даны как примеры. Вы можете пробовать другие позиции.




#### ВНИМАНИЕ!

Когда педали выдвинуты вперед, то пользоваться массажером можно только сидя.

Различные положения секций массажера дают пользователю возможность чередовать массируемые области.



Когда ягодицы пододвинуты вперед:  
Это позиция наиболее удобна  
для массажа бедер.

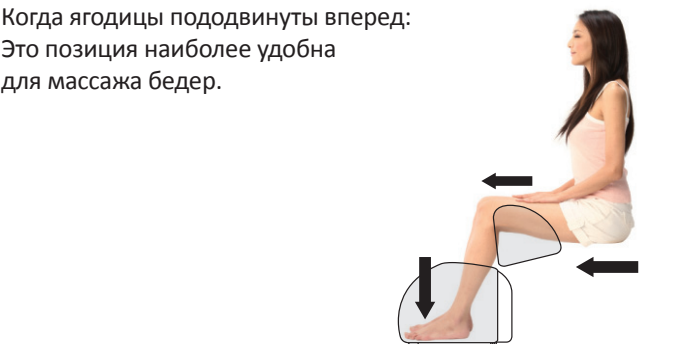


Когда ягодицы отодвинуты назад:  
При такой позиции возможен  
массаж коленей.  
Область массажа можно изменить при  
помощи съемной педали у основания.



## Список деталей

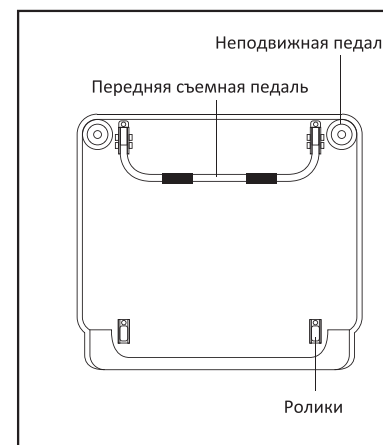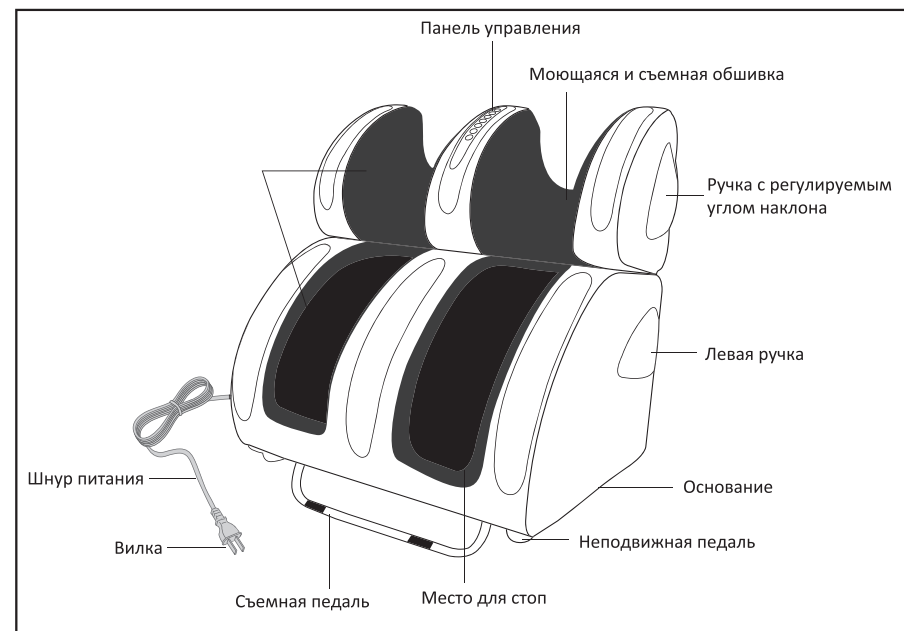

Изображение основания

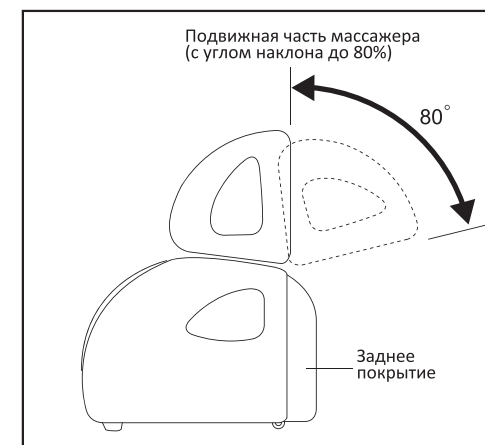

Изображение сбоку

## Как пользоваться панелью управления

**Функция вибрации.**  
Лампочка дисплея.  
При включении массажера  
лампочка горит, при  
выключении – гаснет

**Функция нагрева.**  
Первая фаза – включение:  
лампочка горит постоянно.  
Вторая фаза –  
выключение: лампочка  
гаснет

**Сила массажа.**  
6 режимов мощности  
(см. стр.13)

**Индикатор массажа ног.**  
Первая фаза – включение:  
продолжительное  
горение лампочки.  
Вторая фаза – включение:  
продолжительное мигание  
лампочки. Выключение –  
погасание лампочки

**Индикатор автоматической  
программы.**  
Первая фаза – включение:  
продолжительное  
горение лампочки.  
Вторая фаза – включение:  
продолжительное мигание  
лампочки. Выключение –  
погасание лампочки

**Индикатор режима.**  
(вкл/выкл).  
Выкл. – продолжительное  
мигание лампочки.  
Вкл. – лампочка горит постоянно



**Переключатель вибрации.**  
Вибрация включается только  
с программами. Нельзя  
включить вибрацию отдельно

**Переключатель нагрева.**  
Функция нагрева может  
быть включена независимо  
от автоматических программ.  
Два режима функции нагрева

**Переключатель нагрева.**  
Функция нагрева может  
быть включена независимо  
от автоматических программ /  
2 режима функции нагрева

**Интенсивность массажа.**  
Данная опция возможна только  
при работе программы

**Массаж стоп.**  
Программируемая опция.  
Доступна для 2-х разных  
программ массажа


**Выбор автоматической  
программы.**  
2 автоматические программы

**Выключатель**

## Эксплуатация

## Эксплуатация

1. Подключите шнур и приступайте к эксплуатации массажера.  
После подключения шнура в розетку и включения кнопки питания  
загорится индикатор, что обозначает поступление энергии.

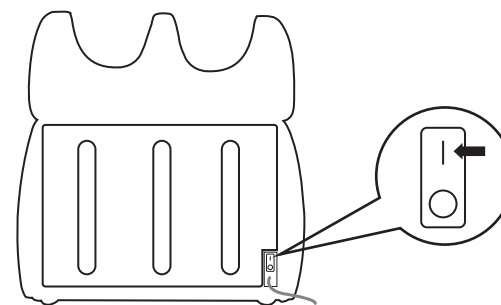

2. Начало эксплуатации массажера.

После нажатия кнопки лампочка загорится.  
Это значит, что массажер находится в режиме  
ожидания. Для начала работы нажмите  
любую кнопку на панели управления.



3. Убедитесь, что включена функция нагрева. Если вы хотите активизировать  
режим нагрева, то нужно нажать соответствующую кнопку. Если индикатор  
горит, то включена первая стадия прогрева. При повторном нажатии этой  
кнопки включится вторая стадия прогрева и индикатор начнет мигать.  
Если еще раз нажать кнопку, то индикатор перестанет гореть и функция  
нагрева выключится.



**Примечание:**

Функция нагрева может сопровождаться предварительным нагревом.  
В зимнее время года массажер следует использовать после  
предварительного прогрева, эта функция позволяет держать ноги в тепле.