



FootPlace

массажер для ног



Инструкция

Поздравляем с приобретением массажера для ног Vegibey FootPlace! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Наименование деталей	4
Панель управления	4
Массаж	5
Уход и обслуживание	6
Устранение неисправностей	6
Технические характеристики	7


Меры предосторожности

Во избежание опасности возгорания, короткого замыкания или других повреждений, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

1. Если массажер не используется, выньте вилку из розетки.
2. Не становитесь на массажер.
3. Используйте массажер только по прямому назначению.
4. Держите кабель питания подальше от источников тепла, не используйте его для передвижения устройства и не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
5. Не используйте устройство в ванной или других влажных помещениях, не проливайте воду на панель управления, поскольку это может привести к короткому замыканию или поломке.
6. Не используйте изделие на нагревательных элементах, например, электрическом одеяле.
7. Если устройство повреждено, необходимо остановить его работу и обратиться за ремонтом или заменой.
8. Не используйте сломанный кабель питания или вилку. Если кабель питания или вилка повреждены, их необходимо заменить на аналогичные им, приобретенные у производителя или в отделе продаж.
9. Прежде, чем вынимать вилку из розетки, убедитесь, что тумблер питания выключен. Не используйте переходники для подключения устройства.
10. Во избежание короткого замыкания или других неисправностей не разбирайте самостоятельно массажер.
11. Не спите во время использования. Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
12. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети и лица с ограниченными возможностями должны находиться под присмотром.
13. Не вынимайте вилку из розетки во время работы массажера.
14. При наличии следующих симптомов или заболеваний, проконсультируйтесь с врачом:
 - беременность или плохое самочувствие;
 - тромбы, аневризмы, варикозное расширение вен;

Если во время массажа вы почувствовали недомогание или боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

Наименование деталей

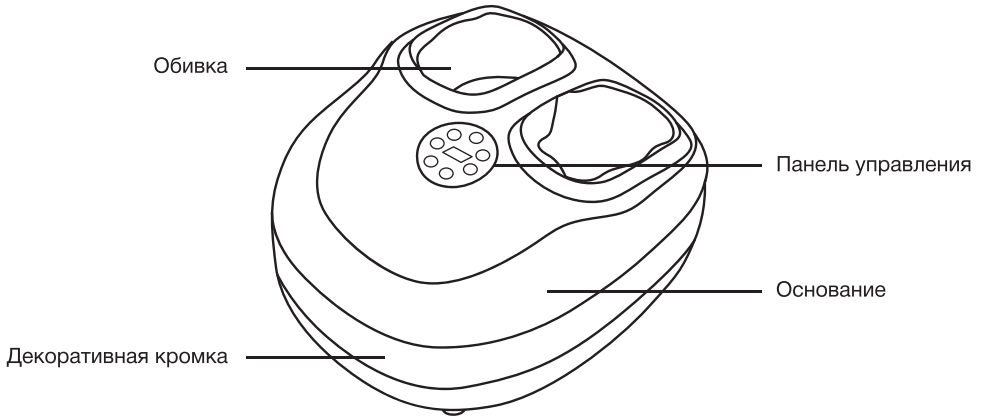

Панель управления



Массаж

Техники массажа: роликовый с разминанием, скребковый, разминающий, воздушно-компрессионный массаж, режим подогрева, вибрация, различные функции массажа для всей стопы, глубокий массаж каждой акупунктурной точки, проработка различных меридианов.

Включите питание, цифровой дисплей не активен, массажер находится в режиме ожидания.

Кнопка включения: нажмите один раз для начала работы, включится массажная программа по умолчанию: режим 1, интенсивность 2, подогрев включен, ионизация включена, ритмичный массаж включен, время по умолчанию 20 минут. Загорается соответствующий индикатор кнопки. Повторное нажатие на кнопку выключает цифровой дисплей, все функции также отключаются.

Кнопка настройки времени массажа: кнопка включения, кнопка настройки времени, каждое нажатие увеличивает время на 5 минут. Регулируемый диапазон 5–30 минут. По истечении времени все функции перестают работать, и устройство переходит в режим ожидания.

Кнопка ритма: включение и выключение функции ритмичного массажа. Функция может включаться и выключаться самостоятельно пользователем, а время по умолчанию составляет 10 минут.

Кнопка подогрева: выбор функции подогрева.

H0-H1-H2.

H0-выключен

H1-более низкая температура

H2- более высокая температура

Ионизация: функция отрицательных ионов включается и выключается. Функция может включаться и выключаться самостоятельно пользователем, а время составляет 10 минут.

Кнопка интенсивности массажа: каждое нажатие на кнопку настраивает интенсивность:

Всего 4 вида интенсивности: L1-L2-L3-L4, по умолчанию L2.

L4 35-38 L3 38-41

L2 41-44 L1 44-46

Кнопка выбора техники массажа: при каждом нажатии меняется режим массажа. Всего четыре модели: A1-A2-A3-A4.

A1- общеукрепляющий массаж

A2- скребковый массаж

A3-разминающий массаж

A4-постукивающий массаж

После окончания массажа, массажер возвращается в режим ожидания. Отключите питание. Вытащите кабель питания.

Уход и обслуживание

Перед чисткой этого массажера обязательно отключите питание. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Пожалуйста, протрите устройство сухой мягкой тканью. Не протирайте устройство грубой тканью с использованием химии.

1. Если массажер сильно загрязнен, пожалуйста, используйте ткань, смоченную в воде с добавлением 3-5% нейтрального моющего средства, и обязательно отожмите ее.
2. Протрите отжатой тканью загрязненное место.
3. Протрите повторно мягкой сухой тканью.
4. Дождитесь, пока массажер высохнет естественным путем.

Пожалуйста, не храните устройство вместе с пенопластом длительное время, чтобы предотвратить выцветание. Пожалуйста, не используйте спирт для очистки массажера.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Массажер не работает, хотя питание включено	Не нажата кнопка включения	Нажмите кнопку включения
	Вилка не плотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку в розетку
	После часа непрерывного использования требуется около 10 мин для остывания массажера	Выключите питание, чтобы дать массажеру остыть
Массажные ролики внезапно останавливаются во время работы	Время работы закончилось	Если вы хотите продолжить массаж, включите заново
	Длительная работа массажера	Выключите питание, чтобы дать массажеру остыть
	Чрезмерное давление, нагрузка на массажер	Отключите питание и уменьшите нагрузку. Включите питание и начните работу
Стопы перегреваются	Чрезмерное давление, нагрузка на массажер. Высокая температура подогрева	Выключите питание, чтобы дать массажеру остыть, после чего переустановите температуру подогрева
Звук во время работы	Звук возникает из-за движения деталей	Звук является нормальным
Питание отключено, устройство дымится	Прекратите использование и отнесите устройство в сервисный центр	

Если вышеуказанные решения не помогут справиться с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с вашим дистрибьютором.

Технические характеристики

Наименование: массажер для ног

Модель: FootPlace

Напряжение: 220 В

Номинальная мощность: 60 Вт

Частота: 50 Гц

Вес: 5 кг

Вес нетто: 5.9 кг

Вес брутто: 7 кг

Время работы по умолчанию: 20 мин

Месяц и год изготовления указаны на
упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в
дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики
изделия в ходе совершенствования своей продукции без
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сделано в Китае.

 **begibey**



EAC **CE**



Design by Begibey Russia