




RelaxNeck 3.0

ударно-кулачковый массажер

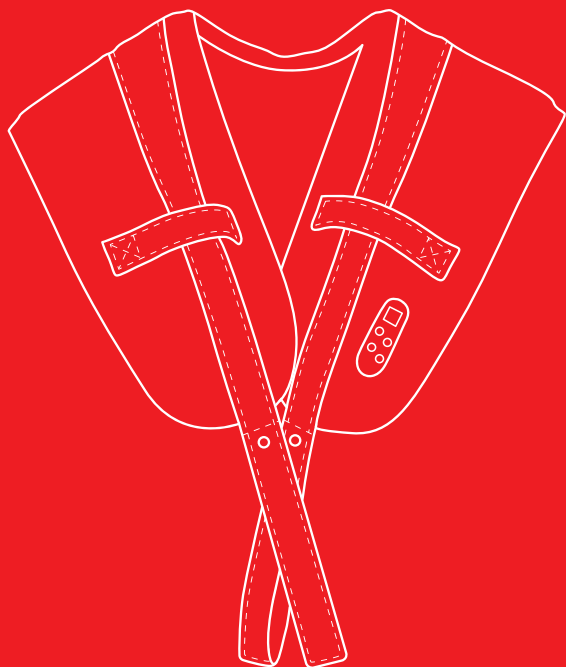

Инструкция

Поздравляем с приобретением массажера RelaxNeck 3.0!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться массажером как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по использованию	3
Способ использования	3
Функции	4
Устранение неполадок	5
Технические характеристики	6

Эксплуатация массажера

1. Подготовка перед использованием

Вставьте вилку питания в розетку и включите питание. Поместите массажный блок на массируемую часть тела и убедитесь, что он удобно закреплен.

2. Включение питания /режим:

Нажатие этой клавиши в течение двух секунд приведет к массажу в автоматическом режиме, а повторное нажатие изменит программу, интенсивность по умолчанию - первая. Для выключения массажера, пожалуйста, нажмите на кнопку в течение двух секунд.

3. Интенсивность +

Во время массажа, нажимайте каждый раз, чтобы увеличить интенсивность.

4. Интенсивность во время массажа:

Нажимайте каждый раз, чтобы уменьшить интенсивность.

Обратите внимание!

(На цифровом экране будет отображаться программа массажа и интенсивность массажа)
интенсивность: P0-P5 программа массажа: A0-A9

Функция автоматического отключения активируется через 10 минут после использования массажера, после одного сигнала продолжительностью 2 секунды.

Способ использования

Плечи и шея




Верхняя часть
спины



Нижняя часть
спины




Ягодицы

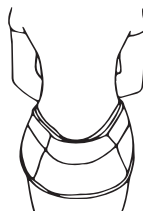

Бедра




Наименование деталей и функции

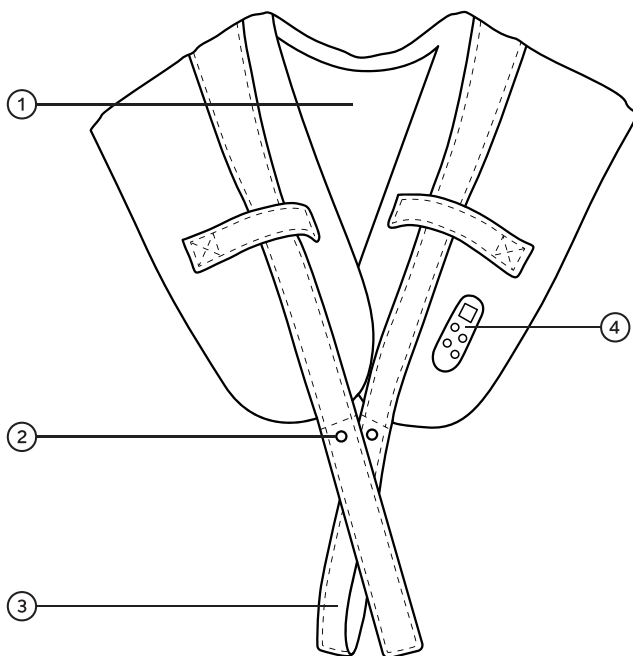

- 1. Массажный блок
- 2. Кнопка
- 3. Ремень
- 4. Панель управления
- 5. Кабель питания
- 6. Вилка питания

Панель управления

- 1. Подсветка
- 2. Вкл/Выкл/Выбор режима
- 3. Настройка режима
- 4. Панель управления
- 5. Интенсивность +
- 6. Интенсивность -

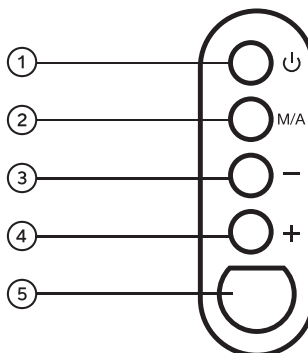

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина / Решение
Массажер не включается	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в электрическую розетку.• Убедитесь, что розетка работает.• Убедитесь, что кнопка начала массажа нажата.
Массаж остановился в процессе	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что кабель питания не отсоединен от электрической розетки.• Убедитесь, что кнопка [O] на панели управления не была нажата случайно.• Возможно, время массажной функции на 10 минут истекло.• Возможно, было активировано устройство защиты от перегрева.• Выключите массажер и дайте ему остыть.• Если проблема не устранена, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Наименование товара: Ударно-кулачковый массажер

Модель: Vegibey RelaxNeck 3.0

Напряжение: 220 В

Мощность 60 Вт

Размер в упаковке: 400x160x230 мм

Вес нетто: 2,3 кг

Вес брутто: 2,6 кг

Таймер: 15 мин

Месяц и год изготовления указаны на
упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в
дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики
изделия в ходе совершенствования своей продукции без
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сделано в Китае

www.begibey.ru
info@begibey.ru



 **begibey**



Design by Begibey Russia