



**ERGONOVA**

# FeelNeck 2GO

массажная подушка

Multi travel

Руководство пользователя




Поздравляем с приобретением массажной подушки Ergonova FeelNeck 2GO! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

## Отличительные особенности

- Вибрационный и разминающий массаж
- Увеличенное время работы
- Огнеупорная пена с эффектом памяти
- 3 режима настройки
- 3 уровня интенсивности
- Приятный для кожи материал

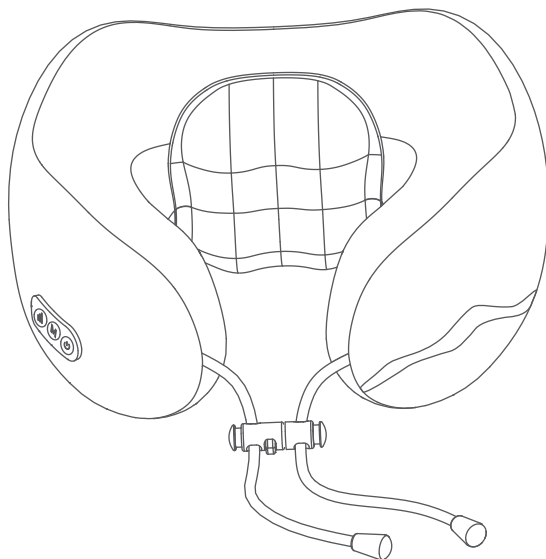

## Меры предосторожности

1. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение соответствует номинальному по техническим характеристикам изделия.
2. Не используйте другие аналогичные аксессуары, не входящие в комплект поставки.
3. Не прикасайтесь к источнику питания или вилке мокрыми руками.
4. Не заряжайте устройство при перепадах напряжения.
5. Данное устройство оснащено встроенным литиевым аккумулятором. Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с действующими в вашем регионе нормами по охране окружающей среды.
6. Инструкции по стирке: Отстегните молнию, чтобы снять матерчатый чехол. Запрещается стирать пенный наполнитель вместе с внутренним механизмом.
7. Лица с ограниченным здоровьем или дети должны находиться в сопровождении взрослых при использовании массажера.

### Меры предосторожности при нажатии кнопок

- Не нажимайте на кнопки мокрыми руками.
- Не проливайте жидкости на переключатель.

## Рабочие условия

1. Не используйте устройство в ванной комнате и других влажных помещениях.
2. Не оставляйте массажер под воздействием солнечных лучей или в нагретом помещении.
3. Не оставляйте устройство вблизи электронагревателей и источников открытого огня.

## Противопоказания

Следующие группы лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием.

1. Проходящие лечение или с плохим самочувствием.
2. Страдающие от заболеваний сердца, церебрального атеросклероза и церебрального тромбоза.
3. Страдающие злокачественными опухолями.
4. Беременные женщины и женщины в период менструации.
5. Страдающие остеопорозом.
6. Использующие кардиостимуляторы или другие имплантированные медицинские устройства;
7. Страдающие острыми заболеваниями;
8. Несовершеннолетние.

# Безопасность

Пожалуйста, прекратите использование в следующих ситуациях!

1. Если устройство неисправно или повреждено.
2. Если во время массажа появилось чувство дискомфорта, пожалуйста, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.
3. Если Вы обнаружили одну из вышеуказанных причин, пожалуйста, отнесите устройство в центр послепродажного обслуживания для проверки и ремонта.

## Инструкции по применению


1. Зажмите кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить массажер.
2. Нажимайте на кнопку “M”, чтобы переключаться между режимами: разминание + вибрационный массаж (kneading + vibration massage), разминающий массаж (kneading massage), вибромассаж (vibrating massage).
3. При включенном режиме разминающего массажа нажмите на кнопку Интенсивности, чтобы выбрать одну из двух скоростей массажа. При включенном режиме вибромассажа нажмите на кнопку Интенсивности, чтобы настроить режим вибрации: непрерывный вибромассаж или постукивающий вибромассаж.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить массажер.
5. Массажер питается от встроенной литиевой батареи. Если вы заметили, что мощность прибора значительно уменьшилась, зарядите массажер.
6. При зарядке, пожалуйста, используйте соответствующий зарядный кабель данного устройства. Проверьте правильность соединения и подключитесь к источнику постоянного тока для зарядки;
7. Не рекомендуется заряжать устройство при перепадах напряжения.
8. Зарядка занимает около 2 часов, пожалуйста, отключите источник питания после полной зарядки;
9. Аксессуары, прилагаемые к устройству, могут использоваться только вместе с устройством. Не рекомендуется использовать аксессуары, не входящие в комплект поставки.

## Устранение неполадок

Если при использовании массажера вы столкнулись с проблемой, ознакомьтесь с описанными ниже действиями по устранению распространенных неисправностей. Если данное устройство все еще находится в неисправном состоянии, пожалуйста, свяжитесь с нами для проверки и ремонта.

| Проблема                            | Возможная причина  | Решение   |
|-------------------------------------|--|---|
| Массажер не включается              | Аккумулятор разряжен   | Полностью зарядите аккумулятор                          |
| Массажер отключился во время работы | 1. Аккумулятор разрядился<br>2. Установленное время массажа (10 минут) закончилось | 1. Зарядите аккумулятор<br>2. Нажмите на кнопку питания |

## Конфигурация


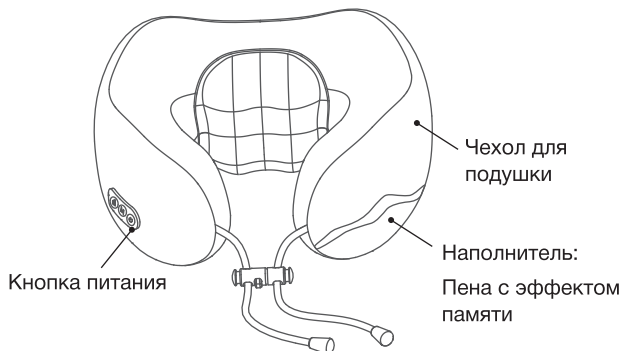


Интенсивность


Режим

Вкл/выкл

## Регулировка размера

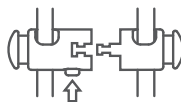
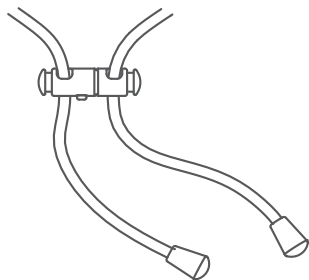


Нажмите кнопку на внутренней стороне фиксатора, чтобы расстегнуть замок.

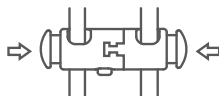

Зажмите фиксатор с двух сторон, чтобы отрегулировать длину.

В комплект поставки изделия входит массажер, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия и гарантийный талон.

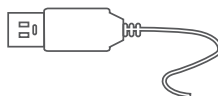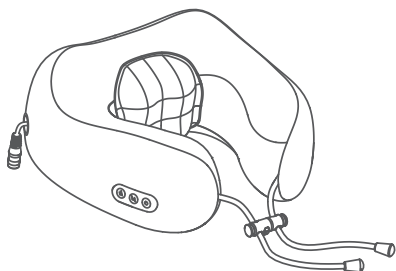

# Технические характеристики

Наименование: массажная подушка

Модель: FeelNeck 2GO

Размер продукта: 255 \* 250 \* 125 мм

Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Номинальное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 7 Вт

Время работы: 10 минут

Вес нетто: 600 г

тел. 8-800-700-14-29

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

[info@ergonova.ru](mailto:info@ergonova.ru)

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



**Дата производства:** смотрите на упаковке.

Сделано в Китае



Designed by Ergonova Germany  
[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

