

**TAKASIMA**

Магазин «Стимул»

Телефон: +7 (903) 754-64-78



**TAKASIMA**

Массажёр для ног  
М-818



Руководство пользователя



## Содержание

Меры безопасности .....	3
Комплектация массажера .....	4
Функции .....	5
Инструкция по эксплуатации .....	6
Способ использования.....	7
Снятие чехлов .....	8
Иллюстрации .....	9
Техническое обслуживание и хранение.....	10
Устранение неполадок и характеристики.....	11

**Благодарим Вас за приобретение нашего массажера для ног.**

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Обратите внимание на знаки «Предупреждение» и «Внимание».

## Предупреждение

Нельзя пользоваться массажером под каким-либо другим эл. напряжением, кроме указанного в инструкции	Использование иного напряжения может стать причиной несчастного случая
При отключении электричества	Выключите питание и извлеките вилку из розетки
Массажёр не работает	Извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр продавца
Вилка или шнур повреждены	Позвоните в сервисный центр и произведите замену

## Устранение неполадок и спецификация

### 1. Устранение неполадок

Состояние	Проверка	Решение
Устройство работает неправильно	Вилка не плотно соединена с розеткой	Плотно соедините их.
	Переключатель питания выключен	Включите его.
После включения питания устройство не работает	Перегорел предохранитель	Вставьте зубочистку в маленькое отверстие предохранителя под кнопкой переключателя, выньте перегоревший предохранитель и замените его.
Громкий шум во время работы	Устройство работает длительное время без перерыва	Выключите питание и сделайте перерыв на 1 час.
Горячая поверхность	Устройство работает слишком долго	Выключите питание и сделайте перерыв на 30-60 минут.
Если после этого устройство по-прежнему работает неисправно или не работает, обратитесь в сервисный центр.		

### 2. Спецификация

Массажёр для ног M-818	
Модель: M-818	Масса/нетто: 17,5 кг
Напряжение: ~ 220 вольт	Частота: 50 Гц
Питание: 40 Вт	Установленный режим работы: 15 минут
Размер товара: (длина × ширина × высота)	52 × 42 × 63 см

## Техническое обслуживание и хранение

### 1. Инструкция по техническому обслуживанию

#### Предупреждение

Выключите электропитание и вытащите вилку из розетки перед чисткой устройства.

Для чистки загрязнённых участков, окуните кусочек мягкой ткани в тёплую мыльную воду, отожмите, подсушите и очистите загрязнённую поверхность. Дайте высохнуть, не вытирайте.

#### Примечание:

Рекомендуемое время использования 30 минут.

### 2. Хранение

#### ▲ Храните устройство при следующих условиях:

- Температура: 0°C – 40°C
- Влажность воздуха: 30% – 85%

#### ▲ Удалять пыль и загрязнения.


- Держать устройство чистым и вдали от мест с высокой влажностью.
- Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей или в местах с высокой температурой.
- Не хранить в местах с высоким содержанием коррозионно-активных газов.
- Не использовать в местах с высоким содержанием пыли, масел или смога.
- Не использовать вне помещений.

## Меры безопасности

### Внимание

1. Используйте массажёр не более 30 минут, более продолжительное использование может быть причиной перенапряжения мышц и ущерба нервной системы.
  - Не рекомендуется использовать массажер для ног без предварительной консультации врача:
  - Лицам, с установленным электрокардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
  - Лицам, имеющим многократные травмы спины.
  - Лицам, имеющим хрупкие кости скелета, в особенности позвоночника.
  - Лицам, недавно перенёвшим операцию.
  - Беременным женщинам.
  - Лицам, страдающим остеопорозом.
  - Лицам, имеющим нарушения кровообращения или тромбозы.
  - Лицам с кожными инфекциями.
  - Лицам, находящимся на лечении.
2. Если повреждена упаковка или возникли неисправности, не используйте устройство и свяжитесь с местным торговым представителем или производителем.
3. Не используйте устройство в местах с высокой температурой (вблизи нагревателей и радиаторов).
4. Не применяйте крем для ног, когда используете устройство.
5. Не занимайтесь самостоятельным устранением неполадок, для проведения ремонта свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
6. Не встряхивайте и не роняйте устройство.
7. Не используйте в течение часа после приёма пищи.
8. Не сматывайте электрический шнур слишком сильно, это может привести к повреждению шнура.
9. Не ставьте на устройство тяжёлые вещи.
10. Если произошли неполадки в работе, вытащите электрический шнур из розетки и свяжитесь с сервисным центром.
11. Не используйте в местах с повышенной влажностью (таких как спа, ванная или бассейн).
12. Не используйте массажёр в качестве медицинского оборудования.
13. Не применяйте для чистки растворители, такие как спирт или бензин.
14. Держите вдали от детей.
15. Прибор снабжен нагревательным элементом. Лицам, малочувствительным к теплу, необходимо быть более внимательными.

## Комплектация массажера

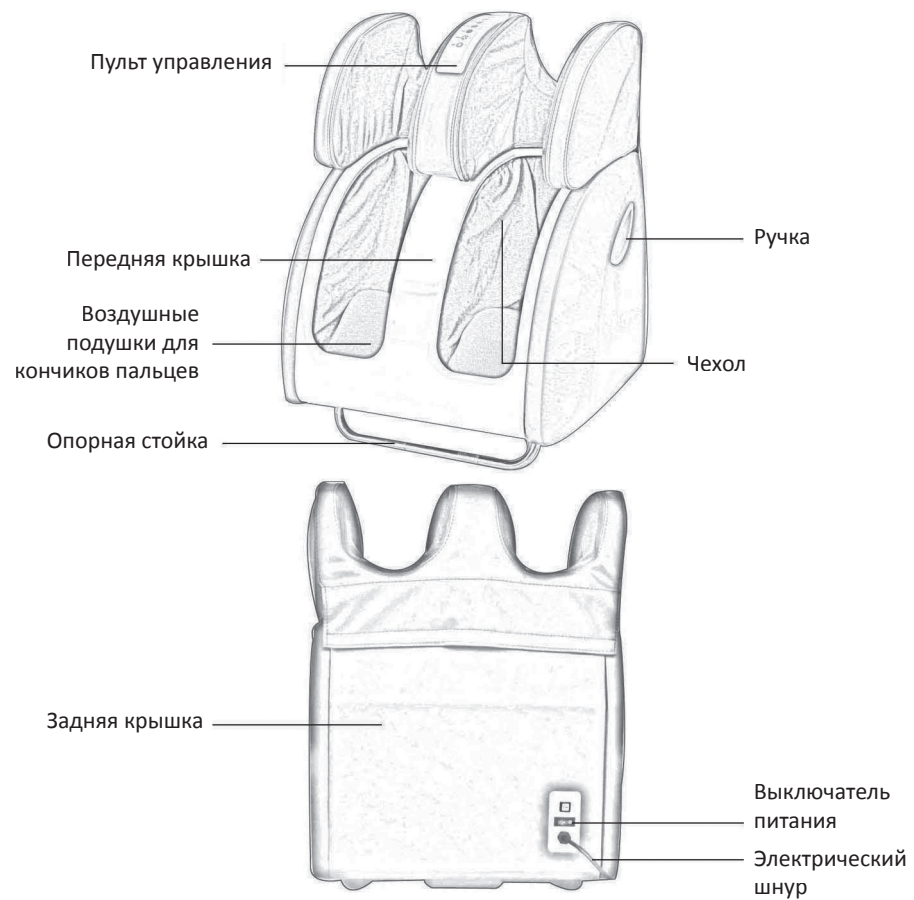

## Иллюстрации

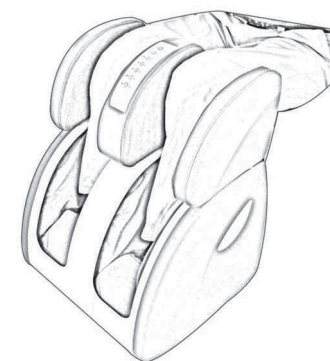


Схема массажа 1

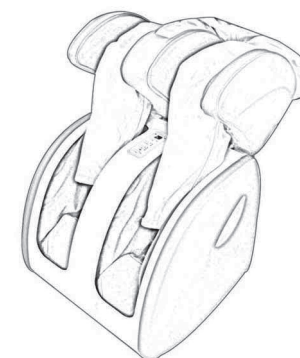


Схема массажа 2

## Снятие чехлов

### Снятие верхнего слоя чехлов


1. Расстегнуть молнию чехлов
2. Протереть
3. Застегнуть молнию



### Снятие чехлов следующего уровня


#### Как снять

1. Отсоединить липучку
2. Расстегнуть молнию
3. Извлечь чехлы

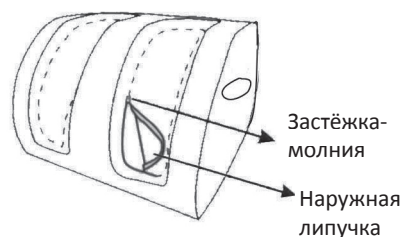

#### Как надеть

1. Крепко зафиксировать внутреннюю липучку
2. Застегнуть молнию
3. Крепко зафиксировать наружную липучку

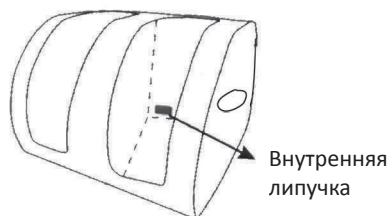

## Характеристика товара

- **Современный дизайн**

Актуальный дизайн, цветовое разнообразие исполнения, легко вписывается в интерьер дома.

- **Функция массажа давлением воздуха. Массажные ролики для подошв стоп**

Устройство воспроизводит интенсивный и мягкий массаж путем давления воздуха. Оборудовано специальными роликами для массажа подошв стоп с целью стимуляции акупунктурных точек. Вместе с воздушным массажем помогает добиться наилучшего эффекта.

- **3 уровня интенсивности и 5 программ предоставляют 17 различных комбинаций массажа**

Вы можете скомбинировать программу и желаемую интенсивность массажа для достижения наилучшего эффекта.

- **Изменение угла спинки**

Угол спинки может изменяться от 0 до 120 градусов, что позволяет выбрать в два раза большую область массажа.

- **Инфракрасное излучение**

Функция прогревания инфракрасным излучением позволяет прогреть мышцы, улучшить циркуляцию крови и обмен веществ.

- **Снимаемые чехлы**

Чехлы легко снимаются и моются.

- **Безопасность**

Воздушные подушки автоматически возвращаются в исходное положение в случае внезапного отключения электричества.

- **Функции**

Уменьшение отеков и тяжести в ногах, улучшение гибкости мышц, контуров ног, стимуляция кровообращения, облегчение боли после упражнений, стимуляция акупунктурных точек на стопах, снятие усталости и нормализация сна.

## Инструкция по эксплуатации


### 1. Размещение устройства

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Чтобы снизить шум от работы устройства, подстелите под него коврик.

### 2. Как включить питание

Включите вилку в розетку

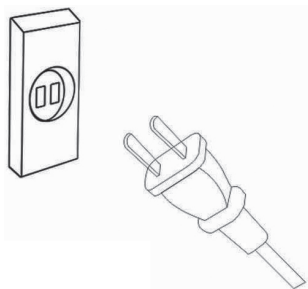


Обязательно убедитесь, что электрический шнур не повреждён.

Перед подключением к сети убедитесь, что кнопка «питание» отключена.

Не подсоединяйте и не выдёргивайте вилку влажными руками.


### Способ использования

1. Перед началом использования поднимите опорную стойку.
2. Включите вилку в розетку.
3. Поверните выключатель на задней стороне массажера, загорится кнопка «Питание» на пульте управления.
4. Нажмите кнопку «Питание» на пульте управления для начала работы прибора.
5. Выберите желаемую программу для начала массажа.

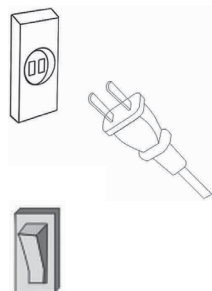

## Способ использования

### Инструкция к пульту управления

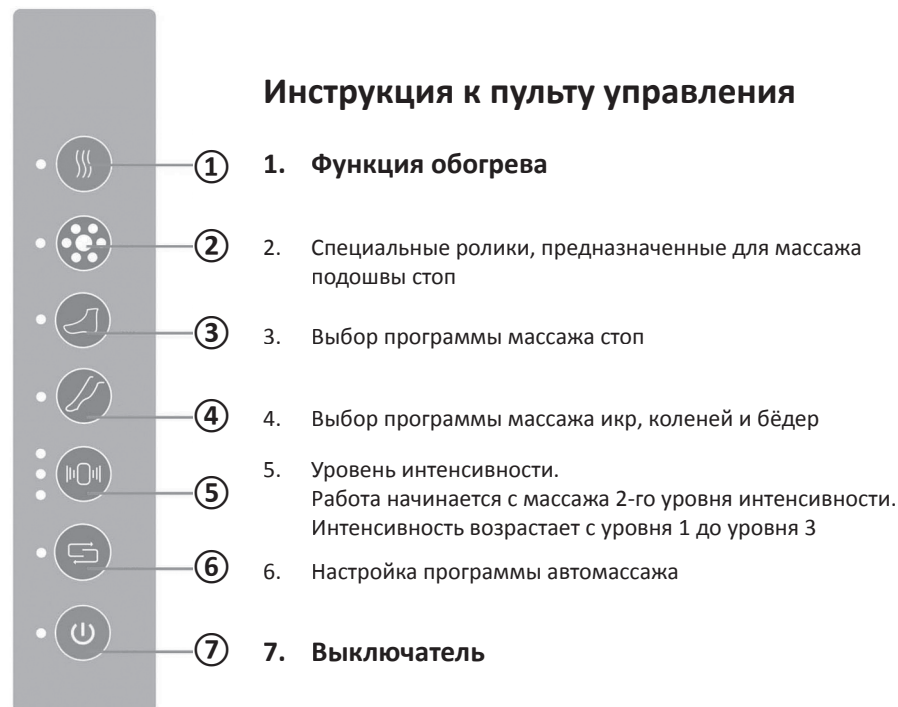

«Интенсивность» – иллюстрация кнопок

